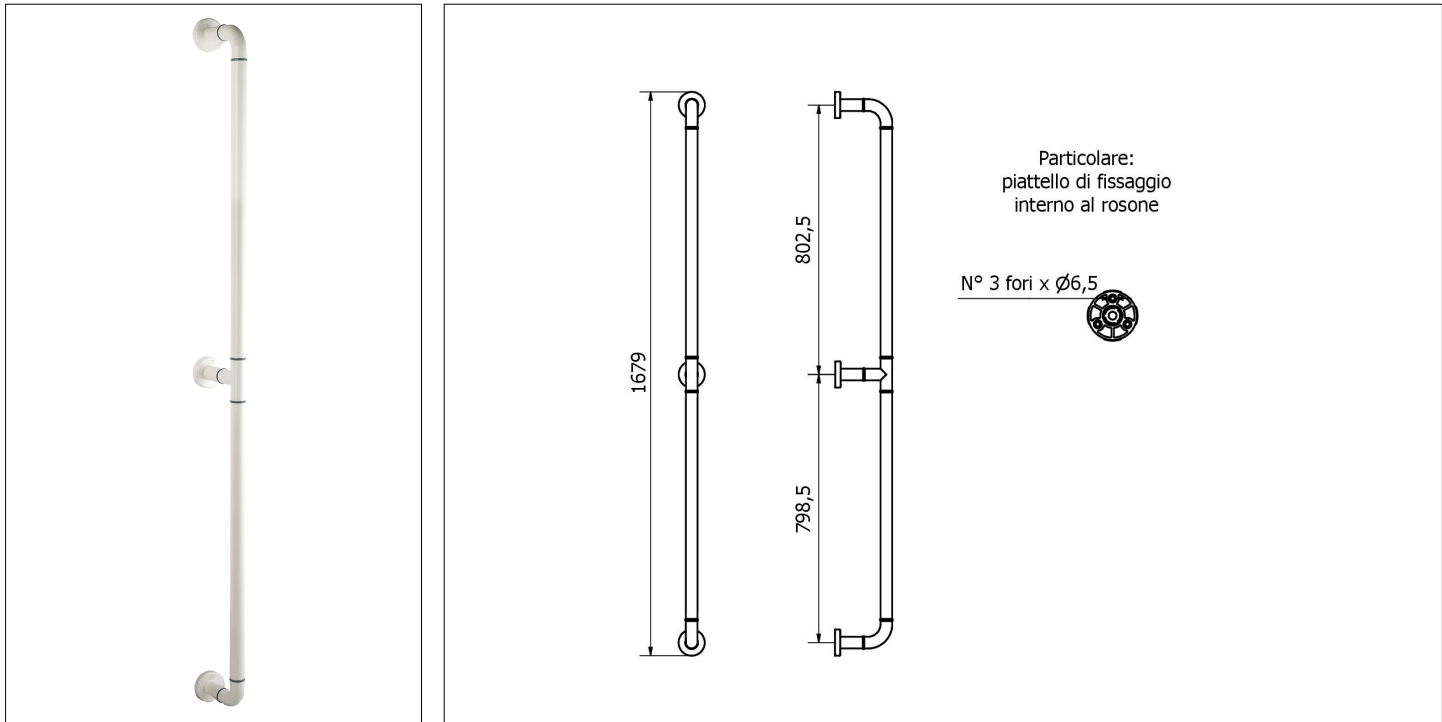




Codice prodotto	300-NY-B	Famiglia prodotto	MANIGLIONI e CORRIMANO	Collezione	Nylon
-----------------	----------	-------------------	------------------------	------------	-------

Descrizione	Maniglione Verticale da parete a parete. Elettricamente isolato. Lunghezza 180 cm. Dispositivo medico in Classe I.
-------------	--

Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017.	CE
----------------	--	----

Prestazioni	Portata 120 kg.
-------------	-----------------

Caratteristiche	Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon estruso Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico. Completo di piattelli di fissaggio e rosoni. I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto. Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto. Parti stampate in nylon Ø 35, con aggiunta di additivo antibatterico. Nessun componente contiene PVC. Sono presenti anelli decorativi in nylon colorato. E' possibile applicare il sedile da appendere SDA; in questo caso la capacità di tenuta è pari a 120 kg.
-----------------	---

Finiture	Colore bianco lucido.
----------	-----------------------

Materiali	Alluminio. Nylon.
-----------	-------------------

Dimensioni	230 x 40 x 840
------------	----------------

Installazione	Fissaggio a muro tramite n° 9 tasselli. Tasselli non compresi nella confezione. Scegliere tasselli adeguati al tipo di muratura. Diametro foro per vite: 6.5 mm. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito. Conservare il numero di lotto presente sull'etichetta attaccata al prodotto. Se il dispositivo dovesse risultare instabile o danneggiato non deve essere utilizzato fino ad avvenuta verifica e approvazione da parte di un installatore professionista.
---------------	--

Manutenzione	Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Disinfettare periodicamente.
Confezione	Imballo: singolo in pluriball e scatola di cartone. Dimensioni: 230 x 40 x 840 (mm) Volume imballo: 0,00773 m ³ Peso: 2,56 (kg)
Peso	2,56 kg