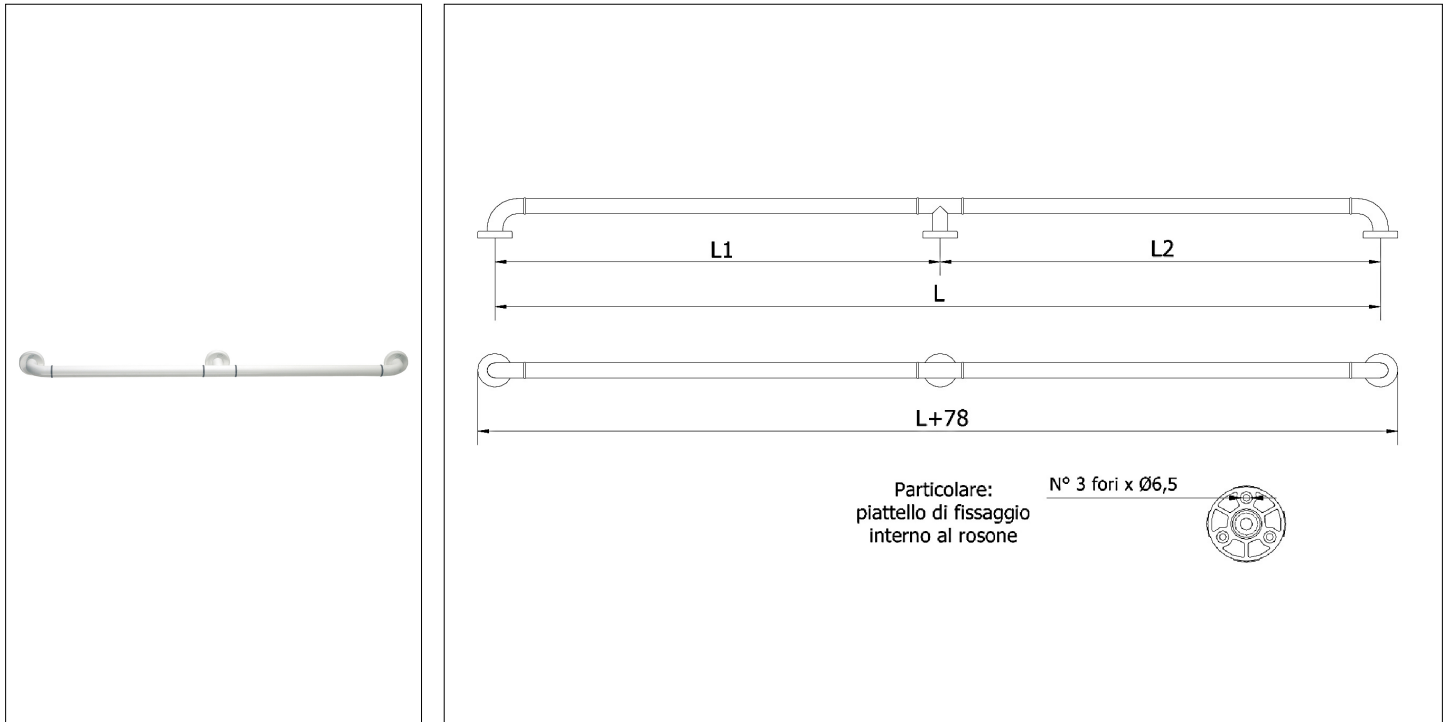




Codice prodotto	CSMD-NY-B	Famiglia prodotto	MANIGLIONI e CORRIMANO	Collezione	Nylon
Descrizione	Maniglione. Serie Nylon. Realizzato di lunghezza su misura. Elettricamente isolato. Dispositivo medico in Classe I.				
Certificazioni	Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001. Dichiarazione di conformità CE al Regolamento Europeo per i Dispositivi medici 745/2017. Norme di riferimento: UNI EN 12182.				
Prestazioni	Portata 120 kg.				
Caratteristiche	Corpo con anima in alluminio rivestito in nylon estruso Ø 35 con aggiunta di additivo antibatterico. Completo di piattelli di fissaggio e rosoni. I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto. Dispositivo parzialmente assemblato per contenere l'ingombro durante il trasporto. Parti stampate in nylon Ø 35, con aggiunta di additivo antibatterico. Nessun componente contiene PVC. Sono presenti anelli decorativi in nylon colorato. Se è presente una parte lineare di almeno 46 cm è possibile applicare il sedile da appendere SDA; in questo caso la capacità di tenuta è pari a 120 kg.				
Finiture	Colore bianco lucido.				
Materiali	Alluminio. Nylon.				
Installazione	Fissaggio a muro tramite n°3 tasselli ogni rosone. Scegliere tasselli adeguati al tipo di muratura. Diametro foro per vite: 6.5 mm. Informazioni per la sicurezza: il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da un installatore professionista competente e qualificato. Il produttore non è responsabile dell'installazione del prodotto. Verificare periodicamente che il fissaggio a parete sia solido e stabile. Mantenere il prodotto adeguatamente pulito. Conservare il numero di lotto presente sull'etichetta attaccata al prodotto. Se il dispositivo dovesse risultare instabile o danneggiato non deve essere utilizzato fino ad avvenuta verifica e approvazione da parte di un installatore professionista.				

Manutenzione

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori. Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti aggressivi, abrasivi, corrosivi, alcool, acidi, acetone, diluente, ecc. Non graffiare. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Disinfettare periodicamente.

Confezione

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone (dimensioni in base al prodotto). Peso: in base al prodotto.
